

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18168 от 13 ноября 2024 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

Титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004

Производитель:

«Shanghai INESA Scientific Instrument Co, Ltd.», Китай

Выдан:

ООО «Лабораторные и весовые системы», г. Минск, Республика Беларусь

Документ на поверку:

МРБ МП.ГМ 2379-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Титраторы по Карлу Фишеру KFT-20V, KFT-40VS. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 13.11.2024 № 120

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

Handwritten signature in blue ink.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 13 ноября 2024 г. № 18162

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
Титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004

Назначение и область применения:

Титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004 (далее - титратор) предназначен для измерения массы и массовой доли воды в органических и неорганических веществах.

Область применения – химико-аналитические лаборатории предприятий химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой промышленности и других областей хозяйственной деятельности, лабораториях научно-исследовательских институтов.

Описание: Принцип действия титратора основан на непрерывном измерении сигнала, поступающего с электродов, помещенных в анализируемый раствор внутри ячейки для титрования, при добавлении или электрохимической генерации титранта до достижения конечной точки титрования, либо точки эквивалентности.

Метод определения воды по Карлу Фишеру основан на химической реакции воды с йодом и двуокисью серы в присутствии основания и спирта. Вода и йод реагируют друг с другом в пропорции 1:1. Йод генерируется электролитическим методом в анодном растворе. По мере вступления воды в химическую реакцию в растворе появляется избыток йода, определяемый по изменению потенциала на двойном платиновом электроде. Конечная точка титрования определяется вольт-амперометрически.

Общее количество влаги определяется посредством измерения общего потребления электричества, израсходованного до достижения конечной точки.

Встроенное программное обеспечение (ПО) устанавливается при изготовлении титратора. Идентификация ПО в модификации KFT-20V отсутствует, номер версии ПО указывается в руководстве по эксплуатации. Конструкция титратора исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Фотографии общего вида титратора представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки титратора представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования представлены в таблице 1
Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон измерений массы воды в пробе	от 10 мкг до 20 мг
Диапазон измерений массовой доли воды в пробе	от 0,0001 % до 100 %
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении массы воды в пробе	$\pm 5 \%$
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении массовой доли воды в пробе	$\pm 5 \%$

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики
Напряжение питания*, В	от 207 до 253
Потребляемая мощность*, Вт, не более	45
Частота питающей сети*, Гц	50
Температура окружающей среды*, °С	от 5 до 35
Относительная влажность воздуха*, % не более	80
Габаритные размеры*, мм, не более	
- длина	300
- ширина	235
- высота	100
Масса*, кг, не более	3
* Характеристики указаны в соответствии с руководством по эксплуатации. При проведении метрологической экспертизы характеристики не подтверждались.	

В комплект поставки входят:

- титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004;
- руководство по эксплуатации.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений:

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации.

Поверка осуществляется по МРБ МП.ГМ 2379-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Титраторы по Карлу Фишеру KFT-20V, KFT-40VC. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений:

техническая документация фирмы «Shanghai INESA Scientific Instrument Co, Ltd.» (руководство по эксплуатации);

технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

методику поверки:

МРБ МП.ГМ 2379-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Титраторы по Карлу Фишеру KFT-20V, KFT-40VC. Методика поверки».

Перечень средств поверки представлен в таблице 3

Таблица 3

№ п/п	Наименование и тип средств поверки
1	Комбинированный прибор Testo 605-H1, основная погрешность измерения температуры не более $\pm 0,6$ °С, основная погрешность измерения влажности не более ± 3 %
2	Барометр БАММ-1, ТУ-25-11-1513-79, диапазон измерений от 84 до 106 кПа, погрешность не более $\pm 0,2$ кПа
3	Стандартные образцы содержания воды в органической жидкости: - 10 мг/г (Hydralyt® water standard sol. 10 mg H ₂ O/g), относительная погрешность сертифицированного значения – не более ± 2 %; - 0,1 мг/г (Hydralyt® water standard sol. 0,1 mg H ₂ O/g), относительная погрешность сертифицированного значения – не более ± 4 %
4	Весы лабораторные с диапазоном измерений от 0,01 до 200 г, класс точности специальный по ГОСТ OIML R 76-1
Примечание - Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.	

Идентификация программного обеспечения:

Версия встроенного программного обеспечения: 1.01А

Закключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя:

Титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004, соответствует требованиям технической документации производителя фирмы «Shanghai INESA Scientific Instrument Co, Ltd.» (руководство по эксплуатации); TP TC 020/2011, TP TC 004/2011.

Производитель средств измерений:

Фирма «Shanghai INESA Scientific Instrument Co, Ltd.», Китайская Народная Республика.

Адрес: No. 5 YuanDa Road, Anting, Shanghai, China, Китайская Народная Республика.

тел: +86-021-39506392/39506429

<https://www.inesarex.com>, e-mail: info@lei-ci.com

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений:

Государственное предприятие «Гомельский ЦСМС»

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1

Телефон +375 232 263330, факс +375 232 263325

e-mail fxi@gomelcsms.by

Приложение:

1. Фотографии общего вида средств измерений на 2-х листах.
2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Заместитель директора
государственного предприятия
«Гомельский ЦСМС»


(подпись)

О.А. Борович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

Фотографии общего вида средств измерений

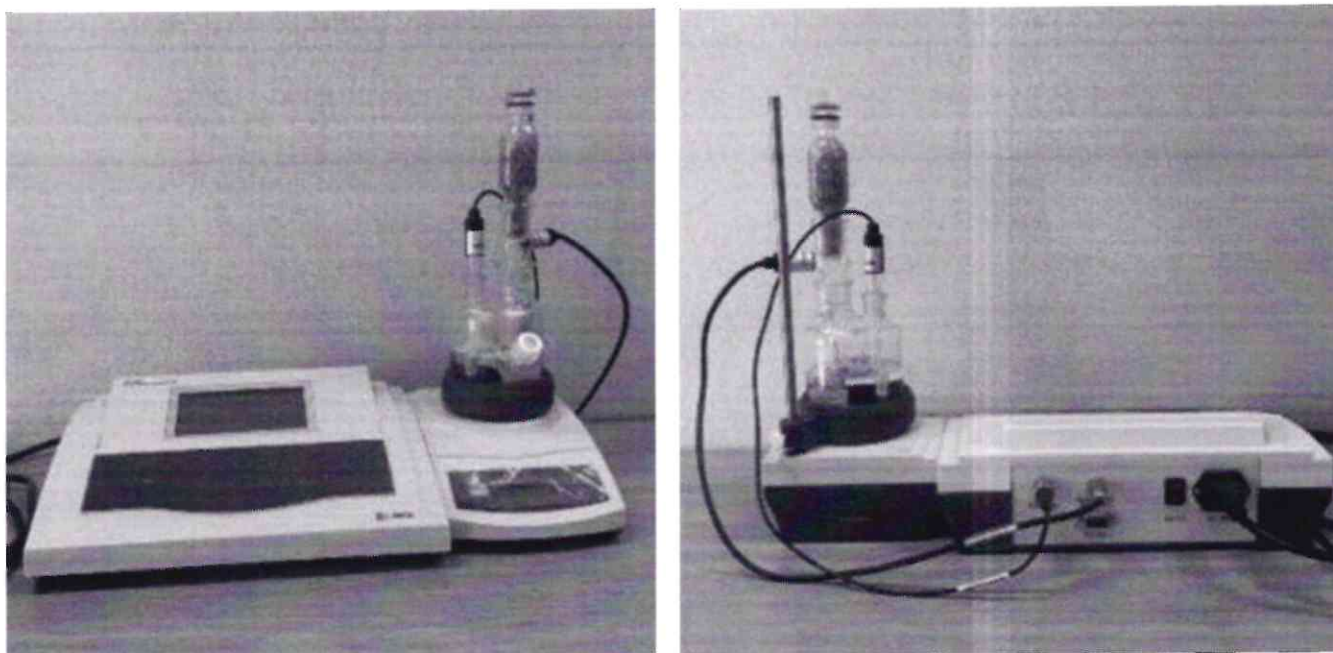


Рисунок 1.1 – Внешний вид титратора по Карлу Фишеру KFT-20V
№ 720912C1423090004

Shanghai INESA Scientific Instrument Co, Ltd.

KFT-20V Karl Fisher Coulometer

Input Voltage: 230V $\pm$ 10%, 50Hz

Power: 45W

Date of manufacture: 2023

Serial No:



720912C1423090004

Рисунок 1.2 – Маркировка титратора по Карлу Фишеру KFT-20V
№ 720912C1423090004

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений

Место нанесения знака поверки, представляющего собой наклейку

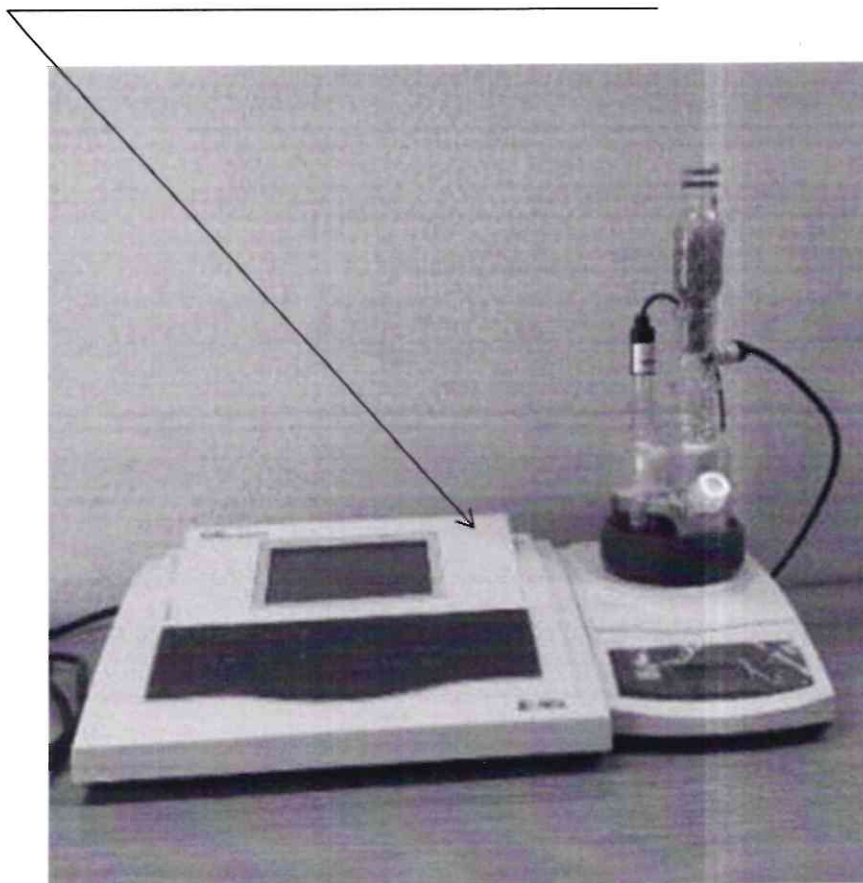


Рисунок 2.1 – Место нанесения знака поверки на титратор по Карлу Фишеру KFT-20V № 720912C1423090004