

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

---



№ 20794 от 1 октября 2026 г.

Срок действия – бессрочно

Наименование и обозначение единичного экземпляра типа средства измерений:  
**Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cyclер с модулем оптическим реакционным CFX96**

Заводской номер: **СТ068904 / 785BR33930**

Производитель:

**«Bio-Rad Laboratories, Inc.», Соединенные Штаты Америки  
(производственная площадка «Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte.Ltd.», Сингапур)**

Владелец сертификата об утверждении типа средства измерений:

**ООО «Альгимед Трейд», г. Минск, Республика Беларусь**

Методика поверки:


**МРБ МП.4120-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Термоциклеры для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cyclер с модулем оптическим реакционным CFX96. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.10.2026 № 114.

Утвержденный единичный экземпляр типа средства измерений разрешается к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя

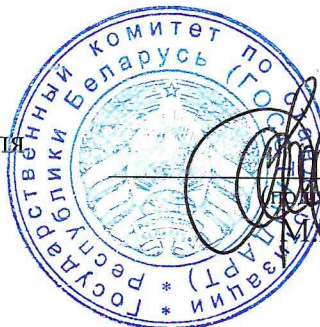

И.А.Кисленко

(инициалы, фамилия)

Приложение к сертификату  
об утверждении типа  
средства измерений  
от 1 декабря 2026г. № 20794

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование и обозначение единичного экземпляра типа средства измерений:  
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cyclер с модулем оптическим реакционным CFX96

Наименование единичного экземпляра типа средства измерений:  
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот

Обозначение единичного экземпляра типа средства измерений:  
модель C1000 Touch Thermal Cyclер с модулем оптическим реакционным CFX96

Заводской номер:  
СТ068904 / 785BR33930

### Назначение:

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cyclер с модулем оптическим реакционным CFX96 (далее – термоциклер) предназначен для измерения интенсивности флуоресценции с целью обнаружения в исследуемом образце целевых дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК), а также определения их количественного содержания в исходном образце.

### Описание:

Принцип действия термоциклера основан на циклической температурно-кинетической амплификации (копировании) фрагментов целевой ДНК в исследуемом образце методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с одновременным измерением в каждом цикле ПЦР (в режиме реального времени) интенсивности флуоресцентного сигнала с помощью оптической системы детектирования.

Конструктивно термоциклер включает два компонента, объединенных в одну систему:

- оптический реакционный модуль CFX96 (с термоблоком для 96-луночных ПЦР-планшетов), включающий оптическую систему термоциклера для проведения измерений интенсивности флуоресценции и сбора данных в ходе измерений;

- базовый блок (модульное шасси) термоциклера C1000 Touch Thermal Cyclер с полноцветным сенсорным дисплеем для управления системой и отображения результатов измерений при работе в автономном режиме.

Управление термоциклером осуществляется при помощи программного обеспечения (ПО), установленного на внешний персональный компьютер. ПО термоциклера обеспечивает автоматическую обработку полученных в ходе измерения данных (с использованием оптимизированных алгоритмов анализа) для качественной и количественной оценки содержания целевой ДНК в исходном образце.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, единица измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Значение         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Диапазон измерений интенсивности флуоресценции, относительные единицы флуоресценции (ОЕФ)*                                                                                                                                                                                                                                                                               | от 1500 до 65000 |
| Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерения интенсивности флуоресценции, %                                                                                                                                                                                                                       | 5                |
| * Относительная единица флуоресценции (ОЕФ) – единица измерения, характеризующая зависимость интенсивности флуоресценции от количественного содержания амплифицированных фрагментов целевой ДНК (продукта ПЦР): $I = f(C)$ ,<br>где I – интенсивность флуоресценции, относительные единицы флуоресценции (ОЕФ);<br>C – количественное содержание фрагментов целевой ДНК. |                  |

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование, единица измерения                                                                                               | Значение                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Диапазон номинальных напряжений питающей сети переменного тока, В*                                                            | от 100 до 240              |
| Номинальная частота питающей сети, Гц*                                                                                        | 50/60                      |
| Максимальная номинальная мощность, Вт*                                                                                        | 850                        |
| Габаритные размеры (высота × глубина × ширина), см*                                                                           | 33 × 46 × 36               |
| Масса, кг*                                                                                                                    | 21 кг                      |
| Условия эксплуатации: *<br>- диапазон температуры окружающего воздуха, °С<br>- относительная влажность окружающего воздуха, % | от 15 до 31<br>не более 80 |
| * Согласно руководству по эксплуатации. При проведении метрологической экспертизы характеристика не подтверждалась.           |                            |

Комплектность: представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование                                                                                 | Количество |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cycler № СТ068904 | 1 шт.      |
| Модуль оптический реакционный CFX96 № 785BR33930                                             | 1 шт.      |
| Кабель питания                                                                               | 1 шт.      |
| Кабель USB (для соединения термоциклера с ПК)                                                | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации                                                                  | 1 шт.      |

Место нанесения знака утверждения типа средства измерений:

Знак утверждения типа средства измерений наносится на титульный лист руководства по эксплуатации.

Методика поверки:

МРБ МП.4120-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Термоциклеры для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений

Методики (методы) измерений, применяемые совместно со средством измерений, производителем не установлены.

Нормативные правовые акты, в том числе обязательные для соблюдения технические нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, документы в области технического нормирования и стандартизации, не являющиеся техническими нормативными правовыми актами, документация производителя или техническое задание заявителя на метрологическую экспертизу, устанавливающие требования к типу средства измерений:

техническая документация производителя (руководство по эксплуатации).

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Идентификационное наименование ПО | Номер версии ПО |
|-----------------------------------|-----------------|
| Bio-Rad CFX Maestro               | не ниже 2.3     |

Производитель:

«Bio-Rad Laboratories, Inc.», Соединенные Штаты Америки

Адрес: 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547, Соединенные Штаты Америки  
(производственная площадка – «Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte.Ltd.», 1 Kaki Bukit View, #03-01 Techview, 415941, Сингапур)

Заключение о соответствии утвержденного типа средства измерений требованиям нормативных правовых актов, в том числе обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, техническим нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации, документов в области технического нормирования и стандартизации, не являющихся техническими нормативными правовыми актами, документации производителя или технического задания заявителя на метрологическую экспертизу в отношении единичного экземпляра средства измерений:

термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96 № СТ068904 / 785BR33930 соответствует требованиям технической документации производителя (руководства по эксплуатации).

Тип средства измерений относится к категории:

6.8 в соответствии с перечнем категорий средств измерений, представляющих совокупность средств измерений одинакового назначения, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, экземпляры утвержденного типа которых подлежат государственной поверке с установленной в нем периодичностью, определенном в приложении к постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 39.)

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее метрологическую экспертизу единичного экземпляра в целях утверждения типа средства измерений:

Республиканское унитарное предприятие «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (Могилевский ЦСМС)

Республика Беларусь, 212011, г. Могилев, ул. Белинского, 33

Телефон: +375 (222) 72 16 58;

факс: +375 (222) 72 16 58

<http://mcsms.by/>

e-mail: [csms\\_mogilev@mogilev.by](mailto:csms_mogilev@mogilev.by)

Приложение: 1. Фотографии общего вида средства измерений на 1 листе.

2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средства измерений на 1 листе.

Главный метролог Могилевского ЦСМС



Л.С. Косьянова

Приложение 1  
(обязательное)  
Фотографии общего вида средства измерений



Рисунок 1.1 – Фотография общего вида термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96 № CT068904 / 785BR33930

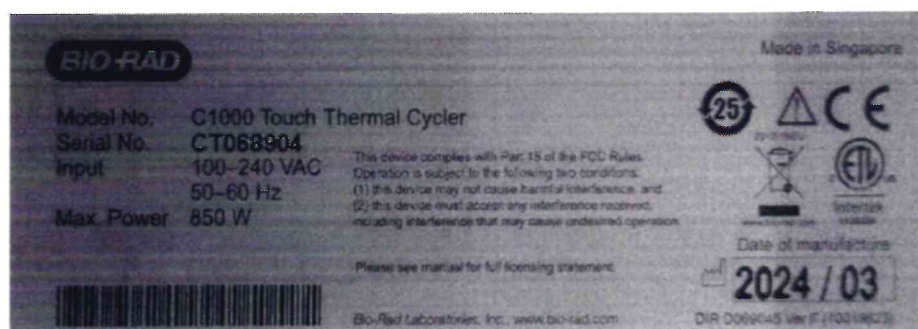


Рисунок 1.2 – Фотографии маркировки термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот модель C1000 Touch Thermal Cycler с модулем оптическим реакционным CFX96 № CT068904 / 785BR33930

Приложение 2  
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средства измерений



Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки