



СОГЛАСОВАНО

Директор

ФГУ «Удмуртский ЦСМ»

Я.Н. Крымский

20 г.

Электрокардиографы одно/трехканальные ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>20594-07</u> Взамен № _____
--	--

Выпускается по техническим условиям ТУ 9441-045-07530936-00.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" (далее – прибор) предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека.

Применяется в медицинских учреждениях и при оказании медицинской помощи на дому.

ОПИСАНИЕ

Прибор регистрирует электрокардиограммы на термореактивной бумажной ленте при помощи термопечатающего механизма и имеет автоматический и ручной режимы работы. В автоматическом режиме производится синхронная регистрация 12 кардиографических отведений.

Прибор состоит из следующих частей:

- усилительно- регистрирующего блока со встроенной аккумуляторной батареей;
- сетевого блока питания;
- кабеля пациента с 10 электродами.

Биоэлектрические потенциалы сердца, снятые с помощью электродов, через кабель пациента поступают на входы изолированного усилителя биопотенциалов. Аналоговые сигналы преобразуются при помощи аналого-цифрового преобразователя в цифровую форму и далее обрабатываются центральным процессорным устройством. Регистрация сигналов производится термопечатающим механизмом на термореактивной бумаге шириной 58 мм.

Одновременно с регистрацией отведений производится измерение частоты сердечных сокращений.

Переключение режимов работы прибора производится с помощью клавиатуры и контролируется на жидкокристаллическом индикаторе.

В приборе имеется звуковая сигнализация сердечного ритма и аварийных ситуаций.

Прибор снабжен цифровым режекторным фильтром частоты питающей сети.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока и от встроенной аккумуляторной батареи. Сетевой блок обеспечивает гальваническую развязку прибора от сети и понижение напряжения питания до сверхнизкого безопасного уровня при помощи сетевого трансформатора. Сетевой блок одновременно служит зарядным устройством для встроенной аккумуляторной батареи.

По электробезопасности прибор соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям класса II типа ВF ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94.

Основные технические характеристики:

- диапазон входных напряжений	от 0,03 до 5 мВ
- пределы допускаемой относительной погрешности установки чувствительности	$\pm 5\%$
- пределы допускаемой относительной погрешности прибора при измерении напряжения в диапазонах:	
от 0,1 до 0,5 мВ	$\pm 15\%$
от 0,5 до 4 мВ	$\pm 7\%$
- пределы допускаемой относительной погрешности установки скорости движения носителя записи	$\pm 3\%$
- диапазон измерений интервалов времени	от 0,1 до 1,0 с
- пределы допускаемой относительной погрешности прибора при измерении интервалов времени	$\pm 7\%$
- неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) при отключенном режекторном фильтре в диапазоне частот :	
от 0,5 до 60 Гц	от минус 10 до +5%
от 60 до 75 Гц	от минус 30 до +5%
- пределы допускаемой погрешности регистрации калибровочного сигнала	$\pm 5\%$
- диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС)	от 30 до 240 1/мин
- пределы допускаемой относительной погрешности прибора при измерении ЧСС	$\pm 5\%$

- питание прибора от сети переменного тока частотой 50 Гц	
напряжением	(220 ± 22)В
от встроенной аккумуляторной батареи номинальным значением напряжения	7,2 В
- мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более	20 ВА
- масса, не более	
прибора	1,75 кг
сетевого блока питания	0,95 кг
- габаритные размеры, не более	
прибора	296x217x66 мм
сетевого блока питания	155x77x55 мм
- средняя наработка на отказ, не менее	4000 ч
- средний срок службы, не менее	5 лет

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на обложку формуляра типографским способом и на планку способом трафаретной печати. Планка крепится на основании корпуса прибора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки прибора:

- электрокардиограф ЮМГИ.941311.005	1 шт.
- кабель пациента ЮМГИ.685622.006	1 шт.
- электрод кардиографический присасывающийся ЭКГЭВ ТУ 9441-008-07530936-98	6 шт.
- электрод кардиографический прижимной ЭКГЭП ТУ 9441-008-07530936-98	4 шт.
- струбцина 6П6.894.000	1 шт.
- кабель выравнивания потенциалов ЮМГИ.685621.025	1 шт.
- блок питания сетевой ЮМГИ.436244.011	1 шт.
- вставка плавкая ВПТ6-1 ОЮ0.481.021 ТУ	1 шт.
- вставка плавкая ВПТ6-7 ОЮ0.481.021 ТУ	1 шт.
- вставка плавкая ВП1-1 5,0 А АГ0.481.303 ТУ	1 шт.
- термобумага К5723АК12 ТУ5457 – 001 – 02424495 - 93	2 рулона
- футляр ЮМГИ.305648.021-01	1 шт.
- руководство по эксплуатации ЮМГИ.941311.007 РЭ	1 шт.
- формуляр ЮМГИ.941311.007 ФО	1 шт.
- методика поверки ЮМГИ.941311.007 Д	1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка проводится по методике поверки "Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" ЮМГИ.941311.007 Д, согласованный ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 29.09.2000 г.

При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- генератор функциональный ГФ-05 ТУ 42-2-561-89, 0,02 - 600 Гц, $\pm 0,5\%$; 0,03 мВ, $\pm 9,5\%$; (0,1-0,2) мВ, $\pm 3\%$; (0,3-10,0) мВ, $\pm 1,5\%$; (0,03- 0,05) В, $\pm 8\%$; (0,3- 10) В, $\pm 1,25\%$; 20 В, $\pm 10\%$;
- лупа измерительная ЛИ-3-10 ГОСТ 25706-83, 15 мм, ЦД 0,1 мм;
- штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05 ГОСТ 166-80, 250 мм; ЦД 0,05 мм.

Межповерочный интервал – один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 19687-89 "Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний"

ГОСТ Р 50267.0-92 "Изделия медицинские. Часть 1. Общие требования безопасности"

ГОСТ Р 50267.25-94 "Изделия медицинские. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографам"

ТУ 9441-045-07530936-00 "Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН". Технические условия"


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Электрокардиографы одно/трехканальные ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Электрокардиографы разрешены к применению в медицинской практике Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00454 от 1 августа 2007 года. Срок действия не ограничен)

Изготовитель: ОАО Концерн "Аксион",
426000, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90.
тел. (3412) 51-24-20, факс (3412) 51-24-23

Генеральный директор
ОАО Концерн «Аксион»

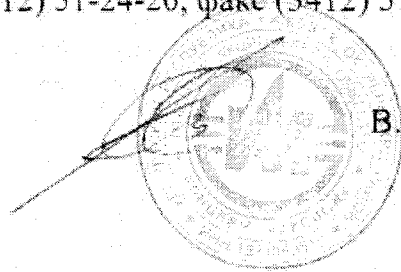

В.А. Пилин