

## ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

Н. А. Жагора

2004 г.

Государственные стандартные образцы  
массовой доли ванадия в твердой матрице  
(комплект БИАС ВН)

Внесен в государственный реестр средств  
измерений Республики Беларусь (раздел  
"Государственные стандартные образцы  
состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный №

ГСО РБ 1565-04, ГСО РБ 1566-04

**ВЫПУСКАЮТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ:** Технические условия: Государственные стандартные образцы массовой доли элементов в твердой матрице, ТУ РБ 100016048.002-2003.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГСО массовой доли ванадия в твердой матрице предназначены для:

- калибровки и градуировки атомно-эмиссионных приборов;
- аттестации методик выполнения измерений содержания ванадия в различных объектах;
- контроля погрешности методик выполнения измерений содержания ванадия;
- определения методами сравнения параметров, характеризующих состав веществ и материалов.

ГСО массовой доли ванадия в твердой матрице применяют в медицинской практике при проведении клинико-диагностических и токсикологических исследований, в здравоохранении при проведении санитарно-гигиенических испытаний пищевых продуктов, воды, почв, воздуха; в фармакологии и фармации при разработке и производстве лекарственных препаратов; в метрологии при сертификации продукции; в ветеринарии, биологии, экологии, криминалистике, судебной медицине, в пищевой, комбикормовой промышленности и других отраслях при определении содержания ванадия.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения ГСО:

**на методики измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 30823-2002 «Корма, комбикорма и кормовые добавки. Определение элементного состава атомно-эмиссионным методом» и др.

**на методики поверки (калибровки), градуировки СИ:** МИ 2345-95 Рекомендации Государственной системы единства измерений. Характеристики градуировочных средств

измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

### ОПИСАНИЕ

Порошок серого цвета. Расфасован в ампулы вместимостью 5 см<sup>3</sup> или пакеты из пленки полиэтиленовой по 1 г. Комплект включает два стандартных образца.

### НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Индекс ГСО     | Аттестуемая характеристика | Интервал допускаемых значений аттестованной характеристики, % | Границы допускаемых значений абсолютной погрешности при P=0,95, % |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| БИАС ВН-10000  | Массовая доля ванадия, %   | 0,95 –1,05                                                    | ±0,05                                                             |
| БИАС ВН-100000 |                            | 9,5 –10,5                                                     | ±0,5                                                              |

Срок годности экземпляра ГСО: 3 года.

### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Расположен на этикетке стандартного образца и нанесен типографским способом


### РАЗРАБОТЧИК

НПООО «Белинтераналит» г. Минск, ул. Казинца, 98

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НПООО «Белинтераналит» г. Минск, ул. Казинца, 98

Директор НПООО  
«Белинтераналит»

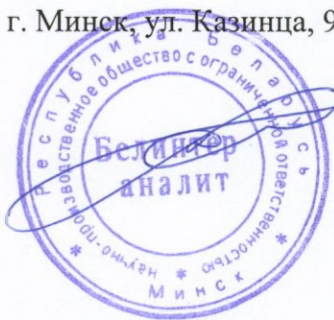

В.В. Сакович

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*